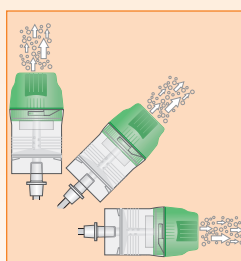


## HOT Top<sup>®</sup>2

Vernebler und Verneblersets mit hohem Output  
für kürzere Behandlungszeiten



## Die neuen HOT Top2 Vernebler

Der HOT Top2 entspricht dem Design eines "offenen" Verneblers und verfügt über zwei Zuluftkanäle, die hohe Output-Flows erzeugen. Dadurch werden Behandlungszeiten verkürzt und die Patientencompliance erhöht.

Zusätzlich verfügt der HOT Top2 Vernebler über eine Reihe von verbesserten Eigenschaften. Dazu gehören ein geringeres Residualvolumen und ein kalibrierter Vernebler-Becher. Der Becher verfügt über einen Schnellverschluss und lässt sich mit einer Vierteldrehung einsetzen und abnehmen. Dadurch ermöglicht der HOT Top2 ein schnelleres Befüllen und bietet eine zuverlässigere Abdichtung zwischen Becher und Verneblerkörper.

Der HOT Top2 wird zur gezielten Aerosol-Deposition im Tracheobronchialsystem eingesetzt. Bei einem optimalen Frischgasflow von 8 L/min, bestehen 80% des Output-Volumens aus Partikeln kleiner als 5 Mikron im Durchmesser, der mittlere Massendurchmesser (MMD) beträgt 3 Mikron.

Bei einem geringeren Frischgasflow von 6 L/min, ist die Leistung vergleichbar mit einem konventionellen "geschlossenen" Vernebler. Der HOT Top2 eignet sich daher auch zur Anwendung mit Kompressoren, die typischerweise geringere Flow-Outputs aufweisen<sup>1</sup>.

### Vorteile auf einen Blick

#### Kürzere Behandlungszeit

Verbesserte Patientencompliance

#### Kalibrierter Verneblerbecher

Genau und schnelle Vorbereitung

#### Standard 22ID-Verjüngung

Für Masken, T-Stücke und Mundstücke

#### Schnellverschluss

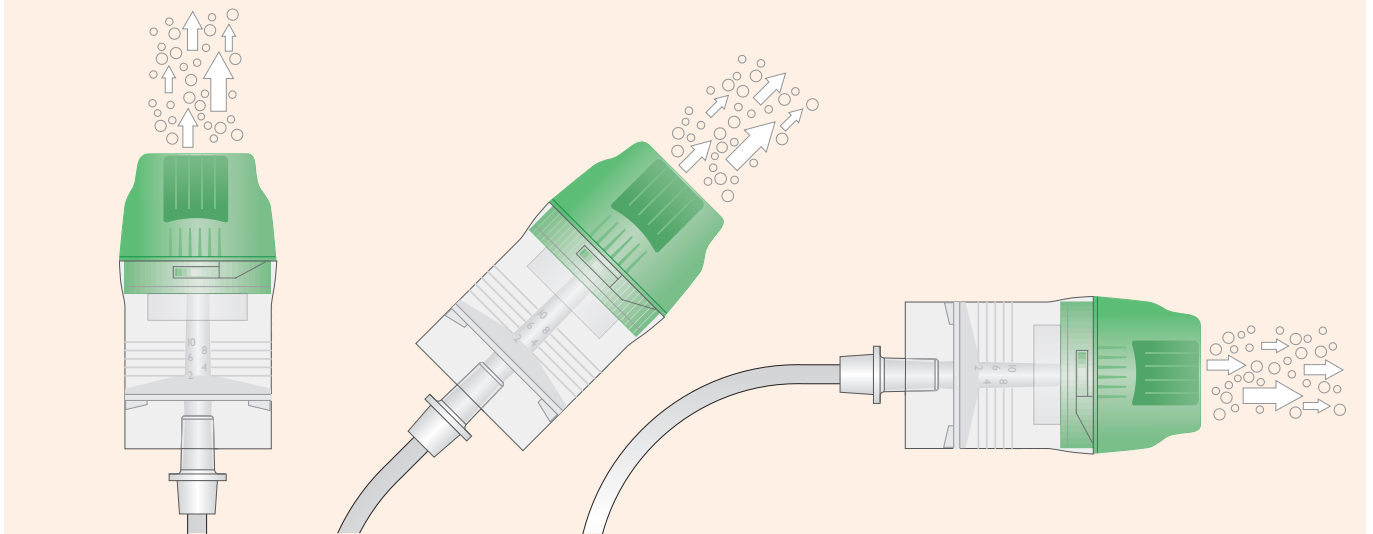
Rasches Befüllen

#### Geringes Residualvolumen

Weniger Medikamentenverlust



## Der Hot Top2 funktioniert in vertikaler und horizontaler Ausrichtung



## Masken-Set mit der neuen Eco Aerosol-Maske

**eco** Intersurgical ist bestrebt, Umweltbelastungen durch neuartige Materialien und Produktionsverfahren zu verringern. Daher bieten wir ein stetig wachsendes Sortiment PVC-freier Produkte an. Die neue PVC-freie Eco Aerosol Maske weist eine wesentlich geringere **negative Umwelteinwirkung als konventionelle Masken auf.**

### Verbesserter Patientenkomfort

Dank neuester Technologie konnten wir zwei Materialien kombinieren: Das Material des Maskenkörpers ist durchsichtig und fest genug, um die Maske in Form zu halten. Ein zweites, weiches Material bildet die Abdichtung, die auf der Haut des Patienten sitzt und einen komfortablen Sitz für eine Vielzahl von Gesichtsformen bietet.

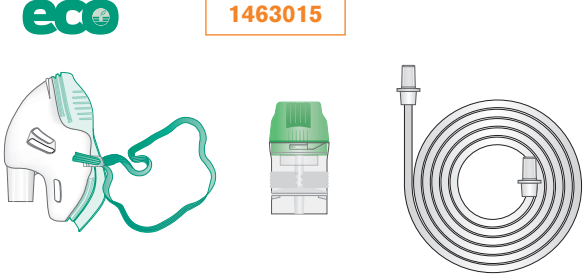
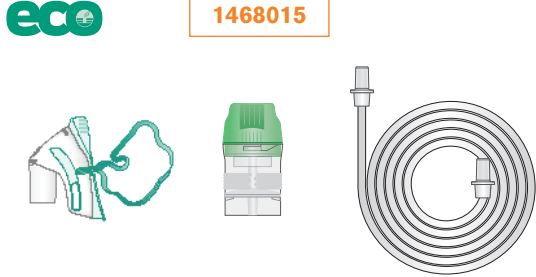
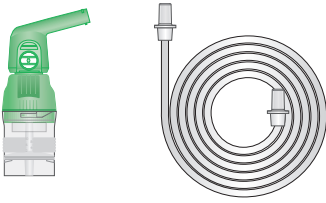





## Optionen mit Sure-Lock

Die HOT Top™2 Vernebler sind mit zwei Schlauchanschlüssen erhältlich – Standard und Sure-Lock. Die Sure-Lock Gewindebasis bietet eine eindeutige, sichere Verbindung und verhindert versehentliche Diskonnektion vom Vernebler oder Flowmeter.

# Bestellinformation

## HOT Top2 Vernebler mit Standard-Anschluss

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  <p><b>1463015</b></p>   |  <p><b>1468015</b></p>    |               |
|  <p><b>1478015</b></p> |  <p><b>1472015</b></p> |               |
| <p><b>1463015</b> HOT Top2 Eco Vernebler-Set mit Maske &amp; Schlauch für Erw.</p>                        |                         | <p>VE: 30</p> |
| <p><b>1468015</b> HOT Top2 Eco Vernebler-Set mit Maske &amp; Schlauch für Kinder</p>                      |                         | <p>VE: 36</p> |
| <p><b>1478015</b> HOT Top2 Vernebler-Set mit Mundstück &amp; Schlauch</p>                                 | <p>VE: 45</p>   |               |
| <p><b>1472015</b> HOT Top2 Vernebler</p>  | <p>VE: 75</p>   |               |

## HOT Top2 Vernebler mit Sure-Lock Gewindebasis

|  |               |
|--|---------------|
| <p><b>1473015</b> HOT Top2 Eco Vernebler-Set mit Sure-Lock Gewindebasis, Maske &amp; Schlauch für Erw.</p>   | <p>VE: 30</p> |
| <p><b>1474015</b> HOT Top2 Eco Vernebler-Set mit Sure-Lock Gewindebasis, Maske &amp; Schlauch für Kinder</p> | <p>VE: 36</p> |
| <p><b>1475015</b> HOT Top2 Vernebler-Set mit Sure-Lock Gewindebasis, Mundstück &amp; Schlauch</p>            | <p>VE: 45</p> |
| <p><b>1471015</b> HOT Top2 Vernebler mit Sure-Lock Gewindebasis und Schlauch</p>                             | <p>VE: 75</p> |